

NORIKS ErgoSit — ortopedski jastuk za sjedenje

Izrez za trticu i memorijska pjena visoke gustoće za dugo sjedenje.

Pjena	OrthoFlex memorijska pjena visoke gustoće
Certifikat	OEKO-TEX®, netoksično
Oblik	Izrez za trticu, konturirani oslonac za kukove i kralježnicu
Navlaka	Odvojiva, periva u perilici
Uporaba	Uredska stolica, automobil, putovanja



U PAKIRANJU

- 1 jastuk ErgoSit
- Odvojiva periva navlaka

BRZI POČETAK

1. Izvadite jastuk iz pakiranja i ostavite ga 4 – 6 sati da pjena poprimi puni oblik.
2. Postavite ga na stolicu tako da izrez bude straga, ispod trtice.
3. Sjednite do kraja unatrag, stopala ravno na podu.

1. Prije prve uporabe

- Jastuk je u transportu stisnut — nakon vađenja iz pakiranja ostavite ga 4 do 6 sati na sobnoj temperaturi da pjena poprimi puni oblik.
- Miris nove pjene nestaje nakon nekoliko sati prozračivanja.


2. Pravilno postavljanje

- 1 Jastuk položite na sjedalo tako da **izrez bude straga** — ispod trtice, ne sprijeda.
- 2 Ravni dio jastuka mora u cijelosti ležati na sjedalu, bez preklapanja preko ruba.
- 3 Sjednite do kraja unatrag, tako da leđa dodiruju naslon.
- 4 Namjestite visinu stolice tako da koljena budu u visini kukova ili malo niže, a stopala ravno na podu.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Izrez uklanja izravan pritisak na trtičnu kost.

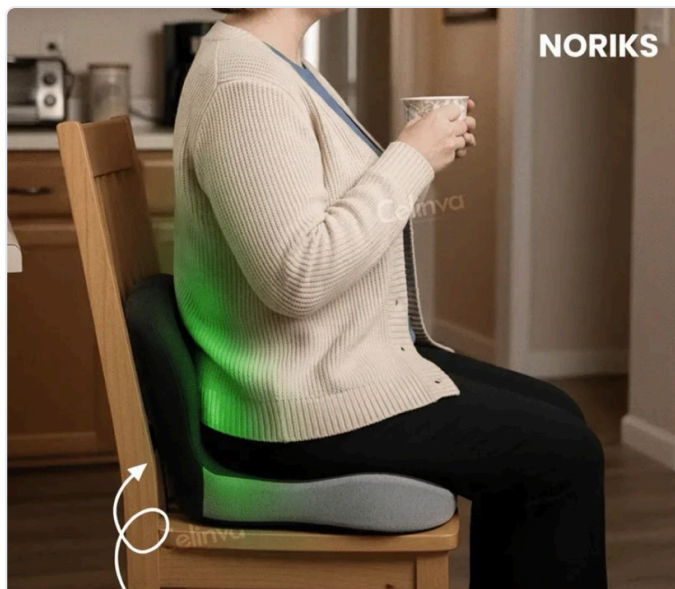

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Konturirani oblik ravnomjerno raspoređuje težinu po kukovima.

3. Svakodnevna uporaba

- Jastuk je namijenjen svakodnevnom sjedenju — u uredu, automobilu i na putovanjima.
- Čak i s jastukom ustanite i prohodajte nekoliko minuta svakih sat vremena.
- Ne koristite ga na jako mekanim ili neravnim podlogama — gubi se oslonac.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Jastuk klizi po stolici	Glatka presvlaka sjedala	Okrenite navlaku protukliznom stranom prema dolje; na kožnim stolicama podmetnite tanku podlogu
Pritisak na trticu i dalje postoji	Izrez okrenut prema naprijed	Okrenite jastuk — izrez ide straga
Pjena djeluje tvrdo	Hladna prostorija	Memorijska pjena omekša na tjelesnoj temperaturi nakon nekoliko minuta
Jastuk je previsok za stol	Nepodešena visina stolice	Spustite stolicu za visinu jastuka

5. Pranje i njega

- Navlaku skinite i perite u perilici na 30 °C, na nježnom programu.
- **Pjenu nikada ne perite u perilici i ne uranjajte u vodu.** Mrlje obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši na zraku.
- Ne sušite pjenu na radiatoru ni na izravnom suncu.
- Jastuk ne čuvajte pritisnut pod teretom — pjena zadržava oblik samo ako je rasterećena.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- 30 dana za povrat novca — proizvod vratite u stanju u kojem ste ga primili.

- Besplatna zamjena veličine unutar 90 dana. Dovoljan je e-mail, bez papirologije.
- Za zamjenu ili povrat pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

NORIKS · Upute vrijede za proizvod naveden na naslovu ovog dokumenta. Pitanja i zamjena veličine: info@noriks.com · noriks.com/hr