


NORIKS kompresijske čarape sa zatvaračem

Graduirana kompresija 15–20 mmHg s bočnim patentnim zatvaračem.

Kompresija	15 – 20 mmHg, graduirana (najjača na gležnju)
Zatvarač	Bočni patentni zatvarač sa zaštitnom unutarnjom podstavom
Veličine	S/M, L/XL, 2XL — prema opsegu lista
Nošenje	Tijekom dana, do 12 sati
Pranje	Ručno u hladnoj vodi ili nježni program

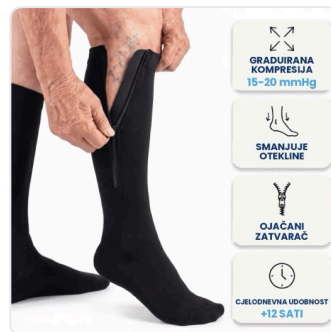

U PAKIRANJU

- 1 par kompresijskih čarapa (prema odabranom paketu)

BRZI POČETAK

1. Izmjerite opseg lista na najširem mjestu i odaberite veličinu iz tablice.
2. Čarape obujte ujutro, prije nego noge otečú, sjedeći.
3. Zatvarač zatvarajte od gležnja prema gore, držeći tkaninu uz nogu.

1. Odabir veličine

Veličina	Opseg lista	Broj obuće
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Veličinu odaberite prema **opsegu lista**, ne prema broju obuće. Mjerite ujutro, na najširem mjestu lista, s opuštenom nogom. Ako ste na granici dvaju raspona, uzmite veći broj.

2. Obuvanje

- 1 Sjednite i otvorite patentni zatvarač do kraja.
- 2 Navucite čarapu preko stopala tako da peta sjedne u za nju oblikovani dio.
- 3 Poravnajte čarapu uz list bez ijednog nabora — nabori stvaraju točke pritiska.
- 4 Jednom rukom pritisnite tkaninu uz nogu tako da zaštitna podstava ostane između zatvarača i kože, drugom polako zatvorite zatvarač od gležnja prema gore.
- 5 Provjerite da gornji rub ne uvija i ne siječe u koljeno.

VIŠE OD 5.200 ZADOVOLJNIH KUPACA



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Zatvarač olakšava obuvanje bez zatezanja.



Graduirana kompresija: najjača na gležnju, slabija prema koljenu.

3. Koliko dugo nositi

- Obujte ih ujutro i nosite tijekom dana — do otprilike 12 sati.
- Skinite ih prije spavanja, osim ako vam liječnik nije odredio drukčije.
- Kod dugog stajanja, sjedenja ili putovanja nosite ih cijelo vrijeme aktivnosti.
- Prvih nekoliko dana kompresija može djelovati neuobičajeno — počnite s 2 do 3 sata dnevno.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Zatvarač se sam otvara	Tkanina je povučena prema dolje ili je opseg pri gornjoj granici	Prije zatvaranja povucite čarapu više uz list; ako se ponavlja, uzmite veći broj
Ne mogu zatvoriti zatvarač	Premala veličina ili otečena noga	Obuvajte ujutro; ako i tada ne ide, zamijenite za veći broj
Trnci, hladni ili blijedi prsti	Prejaka kompresija ili nabor koji steže	Odmah skinite čarapu, izravnajte je i obujte ponovno; ako se ponavlja, javite se liječniku
Čarapa klizi prema dolje	Opseg lista pri donjoj granici raspona	Uzmite manji broj
Crveni tragovi na koži	Nabor ili prejako zategnut gornji rub	Poravnajte tkaninu; blagi otisak pletiva je normalan, dubok utisnut trag nije

5. Pranje i njega

- Perite ručno u hladnoj vodi ili u stroju na programu za osjetljivo rublje, sa **zatvorenim zatvaračem** i u mrežastoj vrećici.
- Bez izbjeljivača i omekšivača — oštećuju elastična vlakna koja stvaraju kompresiju.
- Sušite na zraku, položeno. Ne u sušilici, ne na radijatoru ni na suncu.
- Zatvarač povremeno obrišite vlažnom krpom da u njemu ne ostanu vlakna.

- Uz svakodnevno nošenje par zamijenite otprilike svakih 6 mjeseci — kompresija s vremenom slabi.

Prije nošenja se posavjetujte s liječnikom ako imate perifernu arterijsku bolest, otvorene rane, akutnu upalu kože, dijabetičke promjene na stopalu ili duboku vensku trombozu.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

Kompresijske čarape su svakodnevna potpora, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.