


NORIKS ErgoSit — ortopedski jastuk za sjedenje

Rasterećenje trtice i donjeg dijela leđa.

Postavljanje

- 1 Jastuk položite na ravnu sjedalicu, izrezom prema **natrag**.
- 2 Sjednite tako da trtica bude iznad izreza, bez dodira s podlogom.
- 3 Stopala neka budu na podu, koljena otprilike u razini kukova.

Ako su vam koljena više od kukova, sjedalica je preniska — spustite jastuk ili podignite stol.

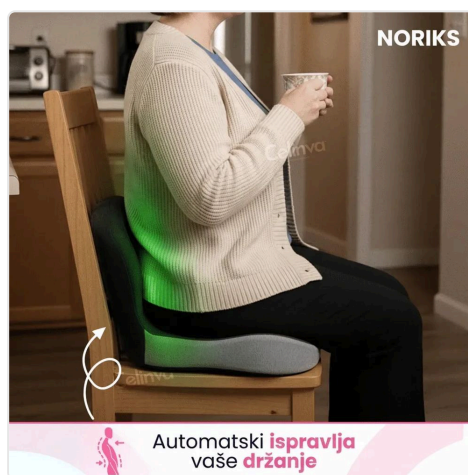

Ispravno sjedenje na jastuku

Gdje se koristi

- Uredska i kućna stolica
- Vozačko sjedalo
- Tvrdе stolice i klupe



U autu, uredu i kod kuće

Napomene

- Memorijska pjena se prilagođava tijelu nakon nekoliko minuta sjedenja.
- Prvih dana koristite ga nekoliko sati dnevno dok se ne naviknete na uspravniji položaj.

Održavanje

- Navlaku skinite i perite na 30–40 °C, sušite na zraku.
- Pjenu ne perite i ne potapajte — po potrebi obrišite vlažnom krpom.
- Ne ostavljajte jastuk na izravnom suncu ni uz izvor topline.

NORIKS · Ove upute vrijede za proizvod naveden na naslovu. Za pitanja: info@noriks.com · noriks.com/hr