

NORIKS ErgoSit — ortopedski jastuk za sjedenje

Izrez za trtiku i memorijska pjena visoke gustoće za dugo sjedenje.

Pjena	OrthoFlex memorijska pjena visoke gustoće
Certifikat	OEKO-TEX®, netoksično
Oblik	Izrez za trtiku, konturirani oslonac za kukove i kralježnicu
Navlaka	Odvojiva, periva u perilici
Uporaba	Uredska stolica, automobil, putovanja



U PAKIRANJU

- 1 jastuk ErgoSit
- Odvojiva periva navlaka

BRZI POČETAK

1. Izvadite jastuk iz pakiranja i ostavite ga 24 sata da pjena poprimi puni oblik.
2. Postavite ga na stolicu tako da izrez bude straga, ispod trtice.
3. Sjednite do kraja unatrag, stopala ravno na podu.

1. Prije prve uporabe

- Jastuk je u transportu stisnut — nakon vađenja iz pakiranja ostavite ga 24 sata na sobnoj temperaturi. Tijekom tog dana više puta ga rukama izgnječite i protresite da se pjena rasporedi.
- Miris nove pjene nestaje nakon nekoliko sati prozračivanja.


2. Pravilno postavljanje

- 1 Jastuk položite na sjedalo tako da **izrez bude straga** — ispod trtice, ne sprijeda.
- 2 Ravni dio jastuka mora u cijelosti ležati na sjedalu, bez preklapanja preko ruba.
- 3 Sjednite do kraja unatrag, tako da leđa dodiruju naslon.
- 4 Namjestite visinu stolice tako da koljena budu u visini kukova ili malo niže, a stopala ravno na podu.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Izrez uklanja izravan pritisak na trtičnu kost.

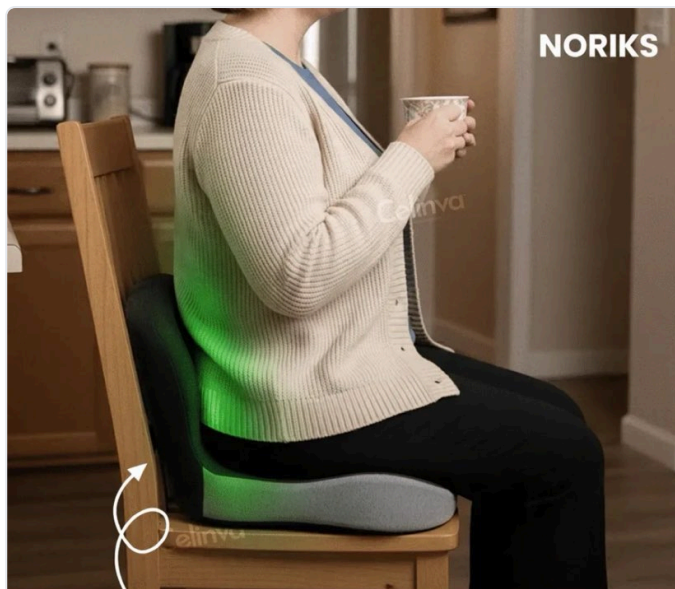

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Konturirani oblik ravnomjerno raspoređuje težinu po kukovima.

3. Svakodnevna uporaba

- Jastuk je namijenjen svakodnevnom sjedenju — u uredu, automobilu i na putovanjima.
- Čak i s jastukom ustanite i prohodajte nekoliko minuta svakih sat vremena.
- Ne koristite ga na jako mekanim ili neravnim podlogama — gubi se oslonac.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Jastuk klizi po stolici	Glatka presvlaka sjedala	Okrenite navlaku protukliznom stranom prema dolje; na kožnim stolicama podmetnite tanku podlogu
Pritisak na trticu i dalje postoji	Izrez okrenut prema naprijed	Okrenite jastuk — izrez ide straga
Pjena djeluje tvrdo	Hladna prostorija	Memorijska pjena omekša na tjelesnoj temperaturi nakon nekoliko minuta
Jastuk je previsok za stol	Nepodešena visina stolice	Spustite stolicu za visinu jastuka

5. Pranje i njega

- Navlaku skinite i perite u perilici na 30 °C, na nježnom programu.
- **Pjenu nikada ne perite u perilici i ne uranjajte u vodu.** Mrlje obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši na zraku.
- Ne sušite pjenu na radijatoru ni na izravnom suncu.
- Jastuk ne čuvajte pritisnut pod teretom — pjena zadržava oblik samo ako je rasterećena.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

ErgoSit je jastuk za svakodnevnu potporu pri sjedenju, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.