


## NORIKS FIT — kompresijska majica

Pripijena kompresija koja izgladuje siluetu i podupire uspravno držanje.

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Tkanina  | Kompresijska pletenina s mikro-tkanim vlaknima |
| Veličine | S – 5XL prema tjelesnoj težini                 |
| Nošenje  | 4 – 10 sati dnevno, ispod odjeće               |
| Pranje   | Hladno, nježni program, bez omekšivača         |
| Sušenje  | Na zraku — sušilica uništava kompresiju        |

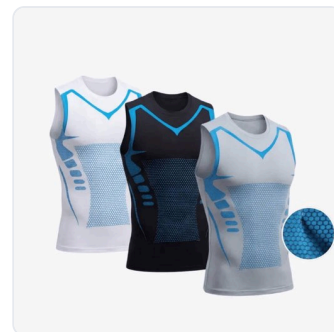

### U PAKIRANJU

- 1 kompresijska majica (prema odabranom paketu)

### BRZI POČETAK

1. Odaberite veličinu prema tjelesnoj težini; za jaču kompresiju uzmite manji broj.
2. Majicu navucite odozdo prema gore, poravnavajući tkaninu dlanom.
3. Perite hladno i sušite na zraku — nikada u sušilici.

## 1. Odabir veličine

| Veličina | Tjelesna težina |
|----------|-----------------|
| S        | 50 – 70 kg      |
| M        | 70 – 90 kg      |
| L        | 90 – 110 kg     |
| XL       | 110 – 130 kg    |
| 2XL      | 130 – 150 kg    |
| 3XL      | 150 – 170 kg    |
| 4XL      | 170 – 190 kg    |
| 5XL      | 190 – 210 kg    |

Veličinu birajte prema težini, ne prema broju obične majice. Između dvije veličine: manji broj daje jaču kompresiju, veći veću udobnost pri cjelodnevnom nošenju.

## 2. Oblačenje

- 1 Majicu zarolajte do ovratnika, kao čarapu.
- 2 Provucite glavu i ruke, zatim je odmotavajte prema dolje.
- 3 Dlanom poravnajte tkaninu od struka prema prsima da nigdje ne ostane nabor.
- 4 Donji rub povucite preko bokova — tako se majica ne rola prema gore.

## Kako NORIKS djeluje?

Aktivna kompresija koja uklanja muške grudi

Ionska zona koja poboljšava formu, jača mišiće i podiže energiju

Pojačano djelovanje na salo oko struka za razgradnju masnih stanica



Kompresija ravnomjerno izgladuje siluetu.



Razlika u držanju s majicom i bez nje.

### 3. Koliko dugo nositi

- Prvi dani: 3 – 4 sata dnevno, dok se ne naviknete na pritisak.
- Zatim: 8 – 10 sati, tijekom radnog dana.
- Ne spavajte u njoj — koža treba razdoblje bez kompresije.
- Za vidljiv učinak na držanje nosite je svakodnevno; prve promjene korisnici obično opisuju nakon otprilike dva tjedna.

### 4. Rješavanje problema

| Što se događa                | Uzrok                                  | Rješenje                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Majica se rola prema gore    | Prekratka ili premala veličina         | Povucite rub preko bokova; ako se ponavlja, uzmite veći broj  |
| Otežano disanje pri sjedenju | Odabran premali broj                   | Prijedite na veći broj — kompresija ne smije ograničavati dah |
| Kompresija je oslabila       | Sušilica ili omekšivač                 | Perite hladno, bez omekšivača, sušite na zraku                |
| Crvenilo ispod pazuha        | Nabor tkanine ili predugo prvo nošenje | Poravnajte tkaninu i skratite nošenje na 3 – 4 sata           |

### 5. Pranje i njega

- Strojno pranje na hladnom, nježnom programu, izvrnuto naopako.
- Bez izbjeljivača i omekšivača.
- Ne sušiti u sušilici — sušite na zraku, položeno, kako bi se očuvala kompresija i oblik.
- Ne peglati.

### 6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

NORIKS FIT je odjevni predmet za svakodnevnu potporu, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.