

NORIKS Bunion Fix — korektor čukljeva

Postupno poravnanje palca uz 30 minuta do 3 sata dnevno.

Veličina	Univerzalna — odgovara svim veličinama stopala
Strana	Isti korektor za lijevo i desno stopalo
Podloga	Mekana unutarnja podloga koja štiti kožu
Podešavanje	Elastične trake s podesivim istezanjem
Preporučeno	Od 30 minuta do 3 sata dnevno



U PAKIRANJU

- 1 korektor čukljeva
- Elastične trake za podešavanje


BRZI POČETAK

1. Stavite korektor tako da jastučić leži uz istaknutu kost, a omča obuhvati palac.
2. Zategnite traku tek toliko da osjetite blago istezanje — nikada do boli.
3. Prvi tjedan nosite 30 minuta dnevno, zatim postupno produljujte.

1. Stavljanje

- 1 Sjednite i stopalo oslonite tako da su prsti opušteni.
- 2 Provucite palac kroz omču dok jastučić ne legne uz istaknutu kost sa strane stopala.
- 3 Traku provucite oko sredine stopala i zategnite je tek toliko da osjetite blago istezanje.
- 4 Provjerite da jastučić leži ravno, bez nabora, i da traka ne stiska vrh stopala.
- 5 Palac mora biti povučen prema van, ali bez zatezanja koje izaziva bol.

**Udobno, prilagodljivo
i lako za nošenje kod kuće**

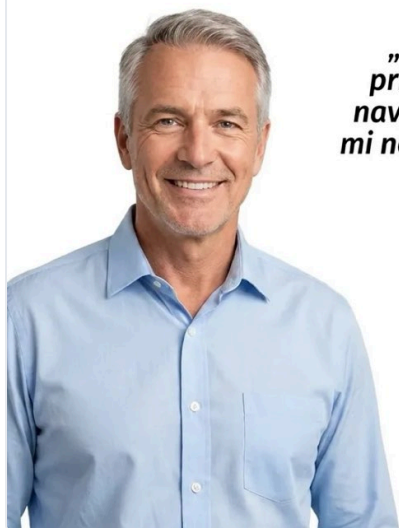

*„Mekan je i lako se
prilagodi. Stavim ga
navečer uz TV i uopće
mi ne smeta — zato ga
nosim redovno.“*

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Korektor obuhvaća palac i rasterećuje istaknutu kost.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija
poravnanja



Patentirani
zglobni mehanizam



Podesivo
rastezanje



Meko jastučić
za čukalj



Vrhunski izdržljivi
materijali



Bezbolno
poravnanje

Cilj je postupno vraćanje palca u pravilniji položaj.

2. Plan nošenja

Razdoblje	Dnevno	Kada
1. tjedan	30 minuta	Navečer, dok sjedite
2. tjedan	45 – 60 minuta	Navečer ili pri mirovanju
3. tjedan	1 – 2 sata	Podijeljeno na dva razdoblja
Od 4. tjedna	2 – 3 sata	U jednom ili dva razdoblja, prema udobnosti

Redovitost je važnija od dužine. Trideset minuta svaki dan daje bolji rezultat od tri sata jednom tjedno.

3. Što možete očekivati

- Prvih nekoliko dana: osjećaj istezanja i rasterećenja nakon skidanja korektora.
- Nakon otprilike dva tjedna dosljedne uporabe: manja nelagoda pri hodaњу i stajanju.
- Nakon otprilike mjesec dana: vidljivija promjena u položaju palca.
- Korektor djeluje dok se nosi i uz redovitu uporabu — nije jednokratno rješenje.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Bol pri nošenju	Traka prejakno zategnuta	Popustite traku; osjećaj mora biti istezanje, nikad bol
Korektor sklizne s palca	Traka preslabo zategnuta ili vlažna koža	Osušite stopalo i zategnite traku za jedan stupanj
Crvenilo na koži	Nabor na podlozi ili predugo nošenje na početku	Poravnajte podlogu i skratite vrijeme nošenja na 30 minuta

5. Čišćenje

- Obrišite vlažnom krpom i blagim sapunom, isperite i osušite na zraku.
- Ne perite u perilici i ne sušite na radijatoru — elastika gubi napetost.

Ne nosite korektor preko otvorene rane ili upaljene kože. Kod dijabetesa, smanjenog osjeta u stopalu ili jake, trajne boli prvo se posavjetujte s liječnikom.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

Bunion Fix je svakodnevna potpora, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.