

NORIKS udlaga protiv hrkanja

Oblikuje se po vašem ugrizu; pet zamjenjivih traka za postupno podešavanje.

Dimenzije	4,1 × 6 × 2,5 cm · dubina ugriza 1,3 cm
Trake	Pet zamjenjivih traka #1 – #5; svaka pomiče čeljust 1,5 mm više
Materijal	Bez BPA, ftalata i lateksa
Oblikovanje	Uranjanje u vruću vodu i ugriz
Čišćenje	Ispiranje mlakom vodom, meka četkica bez paste



U PAKIRANJU

- 1 udlaga
- Pet traka (#1 – #5)
- Kutijica za čuvanje

BRZI POČETAK

1. Uronite udlagu u vruću vodu, ugrizite i ohladite u hladnoj vodi.
2. Počnite s trakom #1 — najmanji pomak čeljusti.
3. Ako hrkanje ne prestane, prijedite na sljedeću traku nakon nekoliko noći.

1. Oblikovanje po ugrizu

- 1 Zagrijte vodu do vrenja i maknite je s vatre; pričekajte oko 30 sekundi.
- 2 Uronite udlagu u vodu na oko 20 sekundi, dok materijal ne omekša.
- 3 Izvadite je i kratko ohladite da ne opeče usta.
- 4 Stavite je u usta i čvrsto ugrizite, jezikom je pritišćući prema zubima oko 20 sekundi da poprimi oblik.
- 5 Izvadite je i uronite u hladnu vodu da otvrdne.

Ako otisak ne ispadne dobar, postupak možete ponoviti — materijal se ponovno oblikuje u vrućoj vodi.

2. Trake #1 – #5

Trake određuju koliko je donja čeljust pomaknuta prema naprijed. Svaka sljedeća pomiče je **1,5 mm više**.

Traka	Pomak čeljusti	Kada je koristiti
#1	najmanji	Uvijek započnite ovdje
#2	+1,5 mm	Ako hrkanje traje nakon 3 – 4 noći
#3	+3,0 mm	Sljedeći korak, uz istu provjeru
#4	+4,5 mm	Kod jačeg hrkanja
#5	+6,0 mm	Najveći pomak — samo ako je čeljust i dalje bez tegoba

Trake za raspodjelu pritiska za maksimalnu udobnost i prijanjanje



Pet zamjenjivih traka; zamjena traje nekoliko sekundi.

Pravilo je jednostavno: najmanji pomak koji zaustavlja hrkanje. Povećavajte tek kad nekoliko noći pokaže da trenutna traka nije dovoljna.

3. Prve noći

- Prvih nekoliko noći moguće je pojačano lučenje slina i osjećaj napetosti u čeljusti ujutro — obično nestaje unutar tjedan dana.
- Okvir je fleksibilan, pa možete piti vodu i govoriti dok je nosite.
- Ako je jutarnja napetost jaka, vratite se na prethodnu traku.




Udlaga drži dišni put otvorenim tijekom sna.

Rješava glavni uzrok hrkanja.

Prije

Poslije

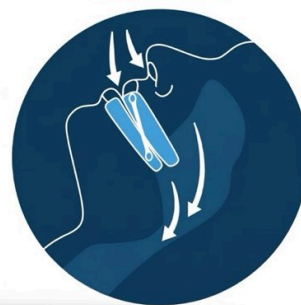

Noriks udlaga protiv hrkanja + nježno pomiče čeljust prema naprijed i stvara savršen otvor za slobodne dišne putove.

Cilj: mirno disanje bez vibracije mekog nepca.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Udlaga ispada tijekom noći	Otisak nije dovoljno dubok	Ponovite oblikovanje i ugrizite čvršće, uz pritisak jezikom
Bol u čeljusti ujutro	Preveliki pomak čeljusti	Vratite se na prethodnu traku; ako bol ostane, prekinite uporabu
Hrkanje se nije smanjilo	Premali pomak	Nakon 3 – 4 noći prijedite na sljedeću traku
Udlaga je promijenila oblik	Ispiranje vrelom vodom ili perilica za posuđe	Perite isključivo mlakom vodom

5. Čišćenje i čuvanje

- Isperite udlagu mlakom vodom nakon svake uporabe.
- Po potrebi je očistite mekom četkicom **bez zubne paste** — pasta grebe površinu.
- Ostavite je da se osuši na zraku i čuvajte u priloženoj kutijici.
- Ne koristite vrelu vodu, perilicu za posuđe ni alkoholna sredstva — visoka temperatura mijenja oblik udlage.

Udlaga nije namijenjena osobama s protezom, mostovima ili tek ugrađenim implantatima, kod bolesti zubnog mesa, tegoba s čeljusnim zglobovima te djeci u razvoju zubi. Kod sumnje na apneju u snu obratite se liječniku.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

Udlaga je pomagalo za svakodnevnu uporabu, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.